


FORA® 6



Système de surveillance multiparamétrique

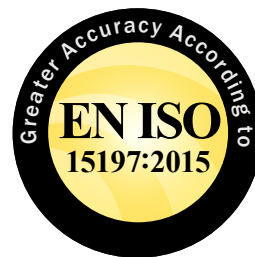

Faites plus avec moins

Mesurez les niveaux de glycémie (BG), hématocrite (HCT), hémoglobine (HB), β -cétone (KB), acide urique (UA) et cholestérol total (TCH) de manière simple, précise et sûre.



FORA® 6

Le dispositif multiparamétrique portable est conçu pour fournir des mesures précises et exactes, comparables aux analyses de laboratoire. Il offre un niveau de précision et d'exactitude conforme aux normes généralement observées en laboratoire.

- Éclairage d'insertion de bandelette
- Le système d'éjection réduit le risque de contamination croisée
- 3 étiquettes de repas : général **Gen**, avant repas **AC** et après repas **PC**; 1 mode QC pour le test de solution de contrôle



Bluetooth®

- Connexion sans fil via la technologie Bluetooth Smart, facilement appairable avec un smartphone / une tablette
- Rétroéclairage blanc, grand écran et design à contraste élevé. Clair et facile à lire
- Enregistre vos résultats de test et inclut l'heure de la mesure

Glycémie

- Aucune calibration nécessaire pour le test de glycémie
- Enzyme : GDH-FAD
- Niveau de précision élevé, supérieur aux normes de la norme EN ISO15197:2015
- Échantillon minuscule – 0,5 µL
- Résultat rapide – 5 secondes
- Plage d'hématocrite : 0 ~ 70 %



Glycémie + Hématocrite + Hémoglobine

Idéal pour les personnes atteintes de diabète ou de pathologies impliquant des modifications des globules rouges, telles que l'anémie, les maladies cardiaques, la déshydratation, l'insuffisance rénale ou la polyglobulie.

*La détection du paramètre hémoglobine dans l'appareil multiparamétrique portable est basée sur un calcul algorithmique plutôt que sur un processus électrochimique, comme c'est le cas pour la glycémie et l'hématocrite.





β-Cétone

Convient aux personnes suivant une insulinothérapie ou à celles souhaitant évaluer l'efficacité des régimes cétogènes pour la gestion du poids ou la mise en forme corporelle.



Acide urique

Idéal pour les personnes souffrant de goutte, de maladies rénales ou de troubles métaboliques.





Cholestérol total

Idéal pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, de syndrome métabolique ou de taux de cholestérol total élevés nécessitant une surveillance régulière.



Connectivité – Solution mobile iFORA HM


Mesurez et synchronisez. Analysez et partagez.

iFORA HM est une application smartphone pratique et conviviale disponible sur les plateformes iOS et Android. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent transférer et gérer facilement leurs données de santé via


FORA 6 Connect.

Fonctions clés de l'application iFORA HM:


- Journal multiparamétrique (enregistre les glucides, activités physiques, doses d'insuline et médicaments)
- Indice Glucose-Cétone (GKI)
- Moyennes sur 7, 30, 180, 365 jours
- Synchronisable avec le système de télémédecine FORA

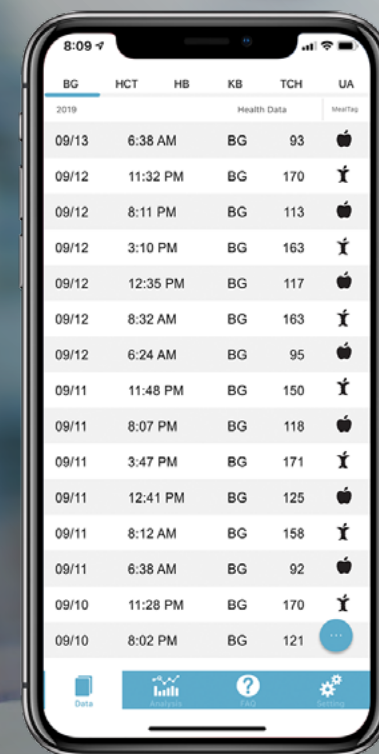

Enregistrements
multiparamétriques

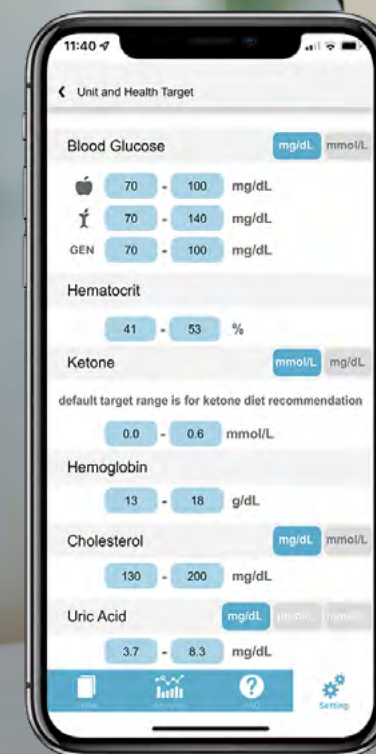

Définition des objectifs de santé

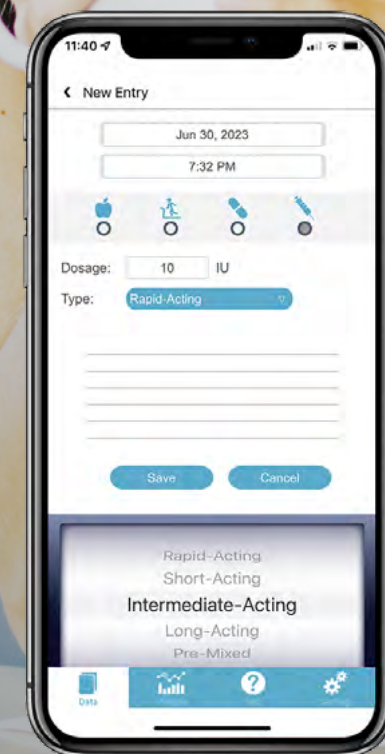


Journal multiparamétrique



Téléchargement gratuit

iFORA HM

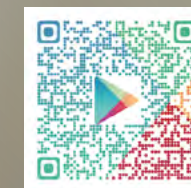

Caractéristiques techniques



FORA® 6 Connect

Avantages	Système de surveillance multiparamétrique pour : Glycémie, 3-en-1 (BG/HCT/HB), β -cétone (KB), acide urique (UA) et cholestérol total (TCH)
Plage de mesure (test de glycémie)	10 ~ 600 mg/dL (0,55 ~ 33,3 mmol/L)
Signal acoustique (bip)	Oui, ON / OFF / Tonalité universelle®
Alerte cétone	Oui, si le résultat est supérieur à 240 mg/dL
Étiquette de repas	GEN / AC / PC ; mode AutoQC
Rétroéclairage LCD	Oui
Éclairage d'insertion de bandelette	Oui
Éjection de la bandelette	Oui
Connectivité	Bluetooth V4.0
Alimentation	1 pile AAA
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 1000 mesures
Capacité de mémoire	1 000 résultats en mémoire
Dimensions	89,8 (L) x 54,9 (l) x 18,0 (H) mm
Poids	64,1 g (sans pile)
Conditions de fonctionnement	8 °C ~ 45 °C

Les instruments FORA® 6 Connect sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformes au marquage CE. L'application iFORA HM et le logiciel FORA® PC-LINK PRO sont des dispositifs médicaux certifiés CE. Veuillez lire attentivement les avertissements et les instructions d'utilisation.

CE₀₁₂₃



Guide vidéo



Comment configurer votre FORA 6 Connect



Comment effectuer une mesure avec votre FORA 6 Connect

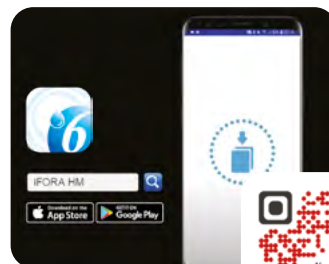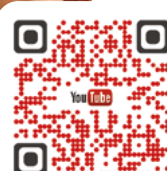

Comment associer votre FORA 6 Connect à votre smartphone



ForaCare propose des solutions complètes de surveillance pour la gestion des maladies chroniques.

Testez simplement, vivez mieux.



Solutions pour le diabète



Solutions pour l'hypertension



Solutions contre la fièvre



Solutions de télésanté



Oxymètre de pouls



Solutions de gestion du poids

FORA®
ForaCare Europe
www.foracare.de

☎ 0 805 020 224 ✉ contact@alphadiab.fr

Le lecteur FORA 6 Connect ainsi que les bandelettes FORA 6 de glycémie et de cétonémie sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV), fabriqués par ForaCare Suisse AG. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (0123). Ils sont destinés aux personnes atteintes de diabète, pour une utilisation quotidienne par des patients ou des professionnels de santé. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Importé et distribué par

ALPHADIAB
www.alphadiab.fr